
convatec
— forever caring —



Vahtplaastrite uus tase

Parem toimivus uuel tasemel*[1]

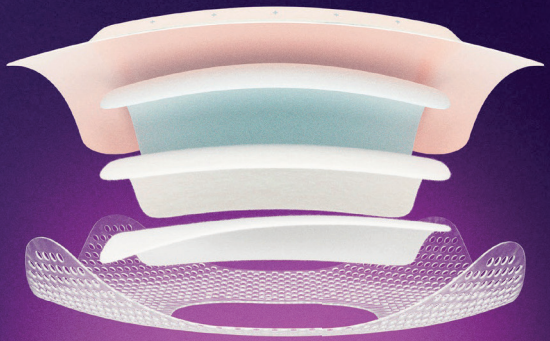

Haavaplaastrite lõikamisjuhend

**Võrreldes valitud haavaplaastritega, mida katsetati in vitro imavuse, vedeliku kinnihoidmise, vedelikuga toimetuleku ja kinnitumise suhtes.*


ConvaFoam™
Border Silicone

Tutvustame ConvaFoam™ haavaplaastreid

ConvaFoam™ on **ainus** vahtplaaster, milles on ühendatud meie **kolm tehnoloogiat**:

- **Aquacel® Hydrofiber®**
- **Superabsorbeerivad kiud**
- **ConvaTac™ Silicone**

Nii tagab haavaplaaster parema*[1] eksudaadi kontrolli ja nahasõbraliku kinnitumise[2] ning pikema kasutusaja*[1], mis tõhustab tervishoiutööd.[3]

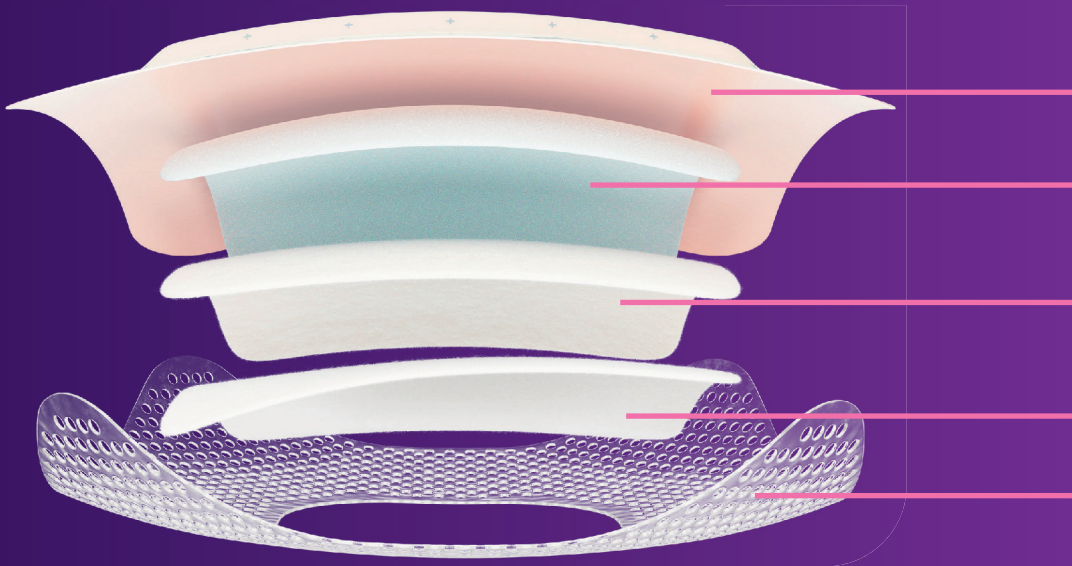

** Võrreldes valitud haavaplaastritega, mida katsetati in vitro imavuse, vedeliku kinnihoidmise, vedelikuga toimetuleku ja kinnitumise suhtes.*

ConvaFoam™-haavaplaastrit saab lõigata nii, et see oleks sobiva suuruse ja kujuga, et hõlbustada selle paigaldamist raskesti seotavatele piirkondadele.[4]

Veenduge, et tööpind on puhas. Vajate:



Meditsiinilised kindad



Käärid



Meditsiiniline kinnitusteip



Prügikott

Et vältida asjatuid plaastrivahetusi, on liimkihiga ConvaFoam-haavaplaastrid sellised, et paigaldamise ajal **saab nende asendit muuta**.*[2]

ConvaTac™ Silicone'i liim on loodud nii, et see kleepuks võimalikult vähe iseenda või meditsiiniliste kinnaste külge ja oleks hõlpsasti kasutatav.*[2]

Hingav kaitsekiht

Kaitsev pehmenduskiht

Superabsorbeerivad kiud
Kiiresti imav kiht

Aquacel® Hydrofiber®
Tihedalt haavapõhja vastu liibuv kiht


ConvaTac™ Silicone
Nahasõbralik liimikiht

Veenduge ise ConvaFoam™-haavaplaastri paremas toimivuses!

Küsige tootenäidist siit:

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **sõrmele või varbale**

1

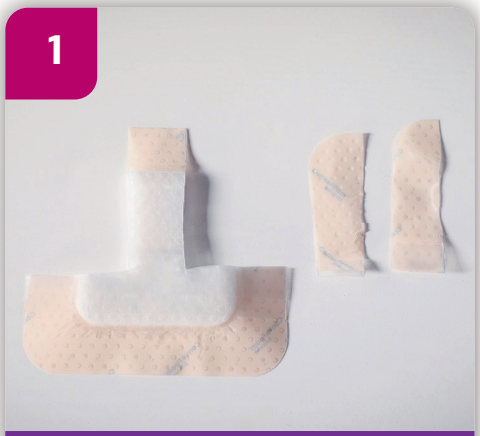

Lõigake väike ruudukujuline haavaplaaster T-kujuliseks. Hoidke lõikejäägid alles, et nendega plaaster pärast paigaldamist kinnitada.

2



Paigaldage T-kujulise plaastri püstosa piki sõrme.

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **sõrmedele või varvastele**

1



Lõigake väikesest ruudukujulisest haavaplaastrist välja kaks V-kujulist tükki.

2



Paigaldage üks plaastri pool käeseljale.

3



Mähkige T-kujulise plaastri ristiosa ümber sõrme külgede. Katke katmata jäänud vaht silikoonliimiga lõikejääkidega.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid sõrme- või varbaplaastri lõikamiseks.

3



Lükake teine plaastri pool sõrmede vahelt läbi ja kinnitage peopesale.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid sõrmedele või varvastele paigaldatava plaastri lõikamiseks.

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **varbale või sõrmele**

1



Lõigake haavaplaastrist välja kaks väikest ruutu, et plaaster jääks H-kujuline.

2



Asetage plaastri keskosa varba alla ja mähkige pikem osa ümber varba.

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **jalalabale või käele**

1



Voltige haavaplaaster pooleks ja tehke plaastri keskossa neli ühtlaste vahedega sisselõiget.

2



Pistke varbad läbi avade ja kinnitage plaaster jalatallale.

3



Voltige plaastri ülejäänud osa üle varba pealispinna ja mähkige see samuti ümber varba. Kinnitamiseks kasutage silikoonliimiga lõikejääke.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid varba- või sõrmeplaastri lõikamiseks.

3



Tõmmake plaaster varvaste vahelt pingule ja kinnitage jalalaba pealispinnale.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid jalalabale või käele paigaldatava plaastri lõikamiseks.

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **kannale, põlvele või küünarnukile**

1



Lõigake ruudukujulise haavaplaastri nurgast välja ruut, et moodustuks V-kuju. Hoidke silikoonliimiga lõike-jäägid alles, et nendega plaaster pärast paigaldamist kinnitada.

2



Asetage kand lõigatud plaastri V-kujulise sälgu põhja.

Plaastri lõikamine ja paigaldamine **peopesale**

1



Tehke sisselõige, mis ulatub ligikaudu 2/3 plaastri pikkuseni.

2



Asetage sisselõige pöidla kohale nii, et plaastri väiksem osa jääb käeseljale.

3



Keerake plaastri mõlemad küljed üles ümber kanna. Kinnitamiseks kasutage silikoonliimiga lõikejääke.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid kanna, põlve või küünarnuki plaastri lõikamiseks.

3



Kinnitage plaastri suurem osa peopesale ja vormige see pöidla ümber nii, et see kinnituks juba paigaldatud väiksema osa külge.

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid peopesa plaastri lõikamiseks.


Dreeni või PEG-sondi* ümbrus:
plaastri lõikamine ja paigaldamine

1



Tehke väikesesse ruudukujulisse plaastrisse sisselõige kuni plaastri keskpaigani. Seejärel tehke veel kaks väikest sisselõiget, et moodustuks Y-kuju.

2

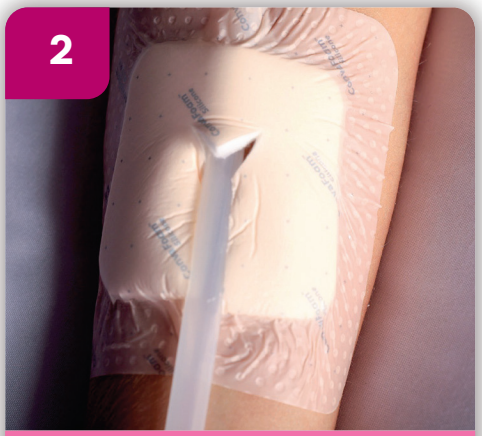

Asetage plaaster sondi peale ja kinnitage seejärel plaastri küljed toru alla.

**Perkutaanne endoskoopiline gastrostoomia*

Vaadake videost meie ekspertide juhiseid dreeni ümbruse plaastri lõikamiseks.

Plaastri paigaldamine **kaenla alla**

ConvaFoam™ Multisite-haavaplaastriga



Vaadake videost meie ekspertide juhiseid plaastri paigaldamiseks kaenla alla.

Plaastri paigaldamine **küünarnukile, kannale või põlvele**

ConvaFoam™ Multisite-haavaplaastriga



Vaadake videost meie ekspertide juhiseid plaastri paigaldamiseks küünarnukile, kannale või põlvele.


Kasulikud nõuanded

1



Veenduge, et lõikamise ajal oleks kaitsekile plaastri peal.

3

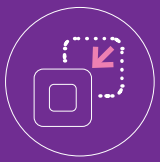

Liimkihiga haava-plaaster on loodud nii, et selle asendit saab paigaldamise ajal muuta.

2



Vajaduse korral kasutage plaastri kinnitamiseks silikoonliimiga lõikejääke.



ConvaFoam™

Border Silicone

4



ConvaTac™ Silicone on loodud nii, et see kleepuks võimalikult vähe iseenda või meditsiiniliste kinnaste külge.*2

5



Vajaduse korral võib plaastrite kinnitamiseks kasutada ka meditsiinilist kinnitusteipi.

6



ConvaFoam™ Sacral- ja Multisite-haavaplaastrite olemasolevaid sisselõikeid saab pikendada, et plaastreid oleks lihtsam paigaldada.

Vaadake meie videoid ConvaFoam™-haavaplaastri paigaldamisest ja eemaldamisest.

Mõõdud ja tellimisinfo

ConvaFoam™ Border



Mõõt	Kogus	Tellimiskood
10 x 10 cm	10	423259
15 x 15 cm	10	423262
21 x 21 cm	5	423275

ConvaFoam™

Silicone



Mõõt	Kogus	Tellimiskood
10 x 10 cm	10	423253
15 x 15 cm	10	423254
17.5 x 17,5 cm	10	423527
21 x 21 cm	5	423536

ConvaFoam™ - haavaplaastrite valik ja allikad

Parem toimivus uuel tasemel paljude haavatüüpide korral.*[1,5]

ConvaFoam™ on täiustatud vahtplaastrite sari, mis on loodud teie ja teie patsientide vajadusi arvestades. Haavaplaastreid iseloomustavad parem imavus, vedeliku kinnihoidmine ja vedelikuga toimetulek[1] ning nahasõbralik kinnitumine.*[1,2]



ConvaFoam™
Silicone



ConvaFoam™
Border

Ainus haavaplaaster, mis ühendab **meie kolm tehnoloogiat - Aquacel® Hydrofiber™, superabsorbeerivad kiud** ja **ConvaTac™ Silicone** - ning tagab **parema*[1] eksudaadi kontrolli ja nahasõbraliku kinnitumise**[2], et haavaplaastri kasutusaeg oleks pikem*[1] ja tervishoiutöö tõhusam.[3]

1. WHRI9478 MS186_DHF1093 ConvaFoam Superiority Report- Testing between May 2021 - June 2022

*Võrreldes valitud haavaplaastritega, mida katsetati in vitro imavuse, vedeliku kinnihoidmise, vedelikuga toimetuleku ja kinnitumise suhtes.

2. WHRI8050 MS172 Adhesion Characteristics of ConvaFoam
3. Wounds UK Best Practice Statement. Effective exudate management. London. Wounds UK, 2013. Allalaaditav aadressilt: www.wounds-uk.com
4. WHRI8051 MS173 In-vitro Performance Characteristics of ConvaFoam

Koostatud: detsember 2025: AP-74625-GBR-ENG-v3

5. ConvaFoam IFU

LMEE-26-037

Linus Medical

Linus Medical OÜ
Narva mnt 5, 10117 Tallinn
Tasuta telefon **800 30 30**
E-post: infoEE@linusmedical.com
www.haav.ee